


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČENÍM PRO DĚTI		Katalogové číslo:
Anesteziologie – A	Klasifikace ZP: IIa	43.009.06.120

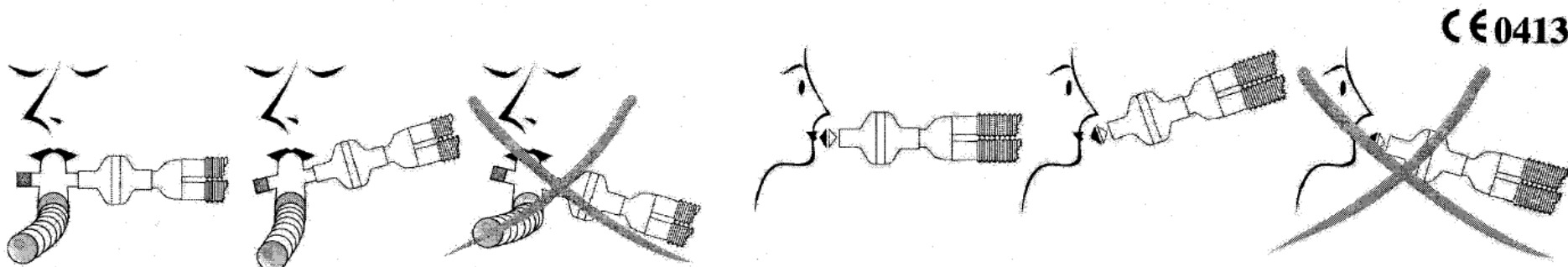

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Popis:

Jednorázový výměník tepla a vlhkosti pro použití při anestezii a intenzivní péči.

Indikace:

Pro ochranu pacienta před nadměrnou ztrátou tepla a vlhkosti

Kontraindikace:

1. Nesmí se používat s konvenčními teplovodními zvlhčovači.
2. Pacienta připojeného k přístroji je nutné pečlivě sledovat. V případě zvýšení odporu nebo při výskytu jiných komplikací je nutné přístroj odstranit nebo vyměnit.
3. Přístroj by měl být vyměněn po každých 24 hodinách nebo při nahromadění sekretů v kratších intervalech.
4. Při použití přístroje je nutné zohlednit jeho prostorové požadavky.

Varování:

Tento přístroj je určen pro jednorázové použití jedním pacientem a nesmí se čistit nebo opakovaně používat. Nesmí se sterilizovat. Před použitím zkontrolujte řádnou propustnost vzduchu. Použijte vhodná výstražná zařízení. Pacienty, kteří jsou připojeni k přístrojům udržujícím životní funkce, je nutné vizuálně sledovat.

Bezpečnostní opatření:

Tento přístroj zajišťuje „samozvlhčování“ pacientem. Posouzení vhodnosti pro každého jednotlivého pacienta je nutné.

Návod k použití:

Přístroj bezpečně připojte mezi umělou dýchací cestou pacienta nebo maskou a rozdvojkou oběhu dýchacího přístroje. Zkontrolujte, zda jsou spojení pevná a zda je přístroj správně orientován.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČENÍM PRO DĚTI		Katalogové číslo:
Anesteziologie – A	Klasifikace ZP: IIa	43.009.06.120

Specifikace produktu obj.č. 6000-6048

Tidální objem	150-1500
Hluchý prostor (ml)	75
Hmotnost (g)	34
Odpor 30 l/min	115 Pa
60 l/min	290 Pa
Retenze bakterií a virů	>99,999 %

Specifikace produktu obj.č. 6100-6137

Tidální objem	50-900
Hluchý prostor (ml)	28
Hmotnost (g)	14
Odpor 20 l/min	140 Pa
Retenze bakterií a virů	>99,99 %

Specifikace produktu obj.č. 7030-7042

Tidální objem	200-1500
Hluchý prostor (ml)	63
Hmotnost (g)	37-41
Odpor 30 l/min	110 Pa
60 l/min	270 Pa
Retenze bakterií a virů	>99,9999 %



INS451 ver5
Datum vydání: 05.05.2010

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz