


Mextra® Superabsorbent

Superabsorpční krytí s tekutinu odpuzujícím podkladem

• Vrstva, která odvádí exsudát rovnoměrně do absorpčního jádra

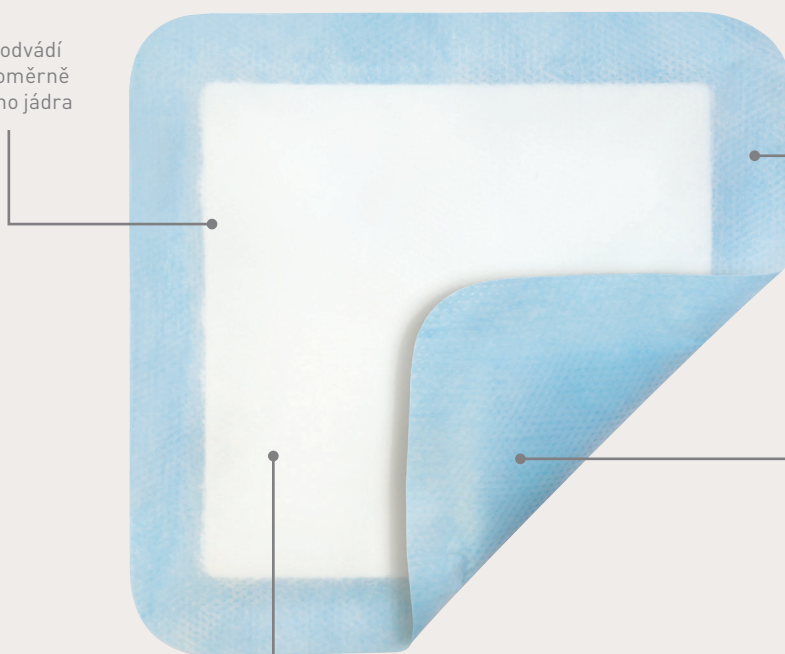

• Hydrofilní kontaktní vrstva

• Tekutinu odpuzující podklad

• Absorpční vrstvu tvoří optimální množství vláken a superabsorpčních částic, které přeměňují tekutinu v gel




- Unikátní 4 vrstvy krytí jsou sestaveny přesně tak, aby poskytovaly optimální zvládnutí exsudátu.
- Vysoká absorpční kapacita snižuje počet nutných převazů
- SAP částice inhibují aktivitu matrixmetaloproteináz (MMP) a kolagenázy a přispívají k rychlejšímu hojení¹
- Vysoká míra retence tekutin zabraňuje úniku exsudátu a maceraci²
- Po absorbování tekutiny si stále udržuje nízký profil
- Jemné okraje a vyšší ohebnost ulehčují aplikaci a zvyšují komfort pro pacienta


Mextra® Superabsorbent


Mölnlycke®


Jak používat Mextra® Superabsorbent

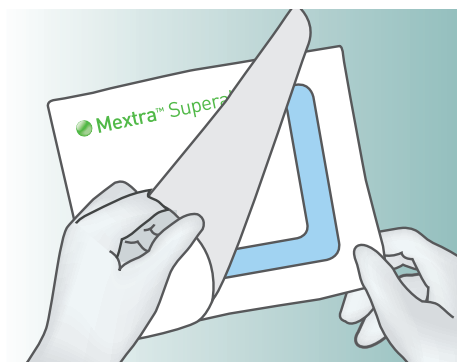

1. Očistěte ránu a vyberte odpovídající velikost krytí Mextra Superabsorbent.

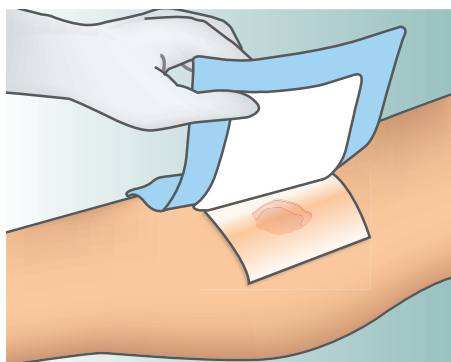

2. Přiložte Mextra Superabsorbent bílou stranou krytí přímo na ránu. Pro lepší výsledek by měl okraj absorpčního polštářku přesovat minimálně 2 cm okraje rány. Mextra Superabsorbent je možné použít také ve spojení se silikonovým krytím Mepitel nebo Mepitel One.

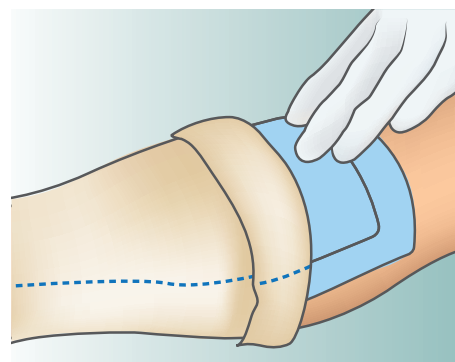

3. Zajistěte krytí Mextra Superabsorbent vhodnou fixací, např. hadicovým obinadlem Tubifast. V případě potřeby může být také použito pod kompresní bandáž.

Oblasti použití

Krytí Mextra Superabsorbent je určeno pro použití na středně až silně exsudující rány. Absorbuje exsudát přes kontaktní vrstvu, zadrží jej uvnitř v jádře ve formě gelu a minimalizuje tak riziko macerace. Tekutinu odpuzující svrchní vrstva z netkané textilie působí jako bariéra a zabráňuje prosáknutí exsudátu.

Četnost výměny

Krytí Mextra Superabsorbent může být ponecháno na místě několik dní. Mělo by být měněno podle klinického stavu rány nebo pokud je naplněna jeho kapacita.

Hlavní výhody Mextra Superabsorbent

- Skvělé absorpční a retenční vlastnosti
- Minimalizace rizika macerace a prosaku exsudátu
- Zachovává celistvost a po absorbování exsudátu se nezvětšuje
- Chrání před únikem exsudátu
- Svrchní vrstva zůstává suchá
- Komfortní pro pacienty
- Použitelné pod kompresní bandáže

Číslo výrobku	Kód SÚKL	Velikost [cm]	Ks v balení	Ks v kartonu
610700	5010010	10 x 10	10	50
610000	5010012	12,5 x 12,5	10	50
610710	5010009	10 x 15	10	40
610100	5010014	12,5 x 17,5	10	40
610720	5010016	10 x 20	10	90
610200	5010018	12,5 x 22,5	10	90
610730	5010020	15 x 20	10	40
610300	5010022	17,5 x 22,5	10	40
610740	5010023	20 x 25	10	40
610400	5010025	22,5 x 27,5	10	40
610750	5010028	20 x 30	10	50
610500	5010030	22,5 x 32,5	10	50
610760	5010033	20 x 40	10	50
610600	5010035	22,5 x 42,5	10	50



Reference: 1.Wiegand C, Hipler UC. A superabsorbent polymer-containing wound dressing efficiently sequesters MMPs and inhibits collagenase activity in vitro. J Mater Sci Mater Med. 2013;24(10):2473–2478. doi:10.1007/s10856-013-4990-6 2. Tickle, J., Fletcher, J. Mextra Superabsorbent made easy. Wounds UK 2012; 8 (4): 1-4.

Více najdete na www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3. tel. +420221890511. Mölnlycke Health Care a Mextra® Superabsorbent jsou registrované názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group.
© 2020 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZWC0650320


Mölnlycke®