

# OPSITE<sup>®</sup> FLEXIGRID<sup>®</sup>

## Transparentní krytí

### Popis

OPSITE FLEXIGRID je transparentní fóliové krytí sestávající z polyuretanové fólie a akrylového lepidla. Fólie je nesená flexibilní mřížkovou podkladní vrstvou, která zajišťuje jednoduchý způsob aplikace.

### Princip funkce

Při použití na rány vytváří fólie OPSITE vlhké prostředí zadržováním exsudátu. Fólie je propustná pro vodní páru a umožňuje tak odpařování nadbytečného exsudátu a zabraňuje maceraci kůže. Fólie OPSITE FLEXIGRID je vodotěsná a přispívá k prevenci bakteriální kontaminace v ráně. Fólie je vysoce roztažitelná a přizpůsobivá, a lze ji snadno aplikovat i na členitě oblasti. Mřížkovou podkladní vrstvou lze použít k mapování ran za účelem monitorování procesu hojení.

### Indikace

- OPSITE FLEXIGRID je indikována pro:
  - Ošetření povrchových ran (např. drobné popáleniny, opařeniny, odřeniny, tržné rány a vředy na nohou v posledním stádiu hojení).
  - Ochranu kůže před třením a vnější kontaminací. Profylaxi proleženin.
  - Upevnění primárních krytí, např. INTRASITE<sup>®</sup> Gel, ALLEVYN<sup>®</sup> Cavity, ALLEVYN Non-Adhesive.
  - Fixaci katetrů.
  - Ochranu kůže kolem stomie a pod sběrnými sáčky na dolní končetinu.
  - Krytí pooperačních ran, kožních štěpů a dárčovských míst.

### Bezpečnostní opatření při použití

Pokud se rána infikuje, infekce se musí léčit podle místního klinického protokolu. U puchýřů dbejte zvýšené opatrnosti při odstraňování krytí, protože horní vrstva kůže na puchýřích je velmi křehká. Tato vrstva kůže se může odtrhnout, pokud krytí nebylo ponecháno na místě velmi dlouho. Při opakovaných aplikacích u pacientů s tenkou nebo křehkou kůží je postupovat opatrně a vyvarovat se poškození takové kůže. Podobně jako u všech adhezivních výrobků byly hlášeny určité případy podráždění a/nebo macerace kůže obklopující ránu. Je nutné připomenout, že nevhodné použití nebo příliš častá výměna krytí, zejména u pacientů s křehkou kůží, může vést k odloupení kůže. Během normálního tělesného procesu hojení se rána zbavuje nadbytečného materiálu, což způsobí, že se rána po prvních několika převazech zdánlivě zvětší.

Pokud se rána po prvních několika převazech dále zvětšuje, přestaňte krytí používat a požádejte o radu zdravotnického pracovníka. Pokud se objeví jakékoli známky podráždění (zarudnutí, zánět), macerace (nadměrná hydratace kůže), hypergranulace (nadbytek tkáně) nebo citlivost (alergické reakce), přestaňte prosíředek používat a požádejte o radu zdravotnického pracovníka.


### Návod k použití

- Očistěte a vysušte oblast aplikace.
- Odstraňte podkladový papír.
- Aplikujte krytí, odstraňte boční chlapeň a krytí vyhladte.
- V případě potřeby ránu obkreslete na zelenou čtverečkovou podkladní vrstvou ještě před jejím odstraněním.
- Odstraňte podkladní vrstvu.
- Chcete-li krytí odstranit, zvedněte jeden roh a stahujte krytí jemným tahem rovnoběžně s pokožkou. Krytí lze ponechat na místě až 14 dní. Při manipulaci s krytím a jeho likvidaci postupujte opatrně.

### Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	V krabici
4628	6 cm x 7 cm	100
66004633	10 cm x 8 cm	100
4629	10 cm x 12 cm	10
4630	10 cm x 12 cm	50
4631	15 cm x 20 cm	10
4632	12 cm x 25 cm	20

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglie.  
 ©Ochranné známky společnosti Smith & Nephew ©Smith & Nephew  
 Datum vydání 07/2017 www.smith-nephew.com

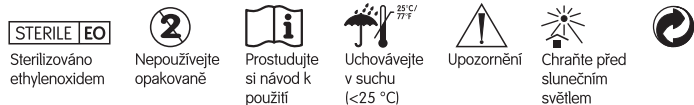

Nepoužívejte, pokud je obal otevřený či poškozený

# OPSITE<sup>®</sup> FLEXIGRID<sup>®</sup>

## Opatrunek przezroczystry

### Opis

Opatrunek OPSITE FLEXIGRID jest opatrunkiem z przezroczystej folii poliuretanowej z akrylową warstwą samoprzylepną. Folia opiera się na elastycznym nośniku siatki zapewniając prosty system zakładania.

### Sposób działania

Folia OPSITE stosowana na rany tworzy wilgotne środowisko, zatrzymując wysięk. Folia jest przepuszczalna dla pary wodnej, pozwalając na odparowanie nadmiaru wysięku i zapobiegając maceracji skóry. Opatrunek OPSITE FLEXIGRID jest wodoodporny i pomaga w zapobieganiu zakażeniom bakterijnym rany. Folia jest bardzo rozciągliwa i dopasowuje się do kształtu ciała i można ją łatwo dostosować do trudnych miejsc. Nośnik siatki może służyć do mapowania ran w celu monitorowania procesu gojenia.

### Wskazania

- Opatrunek OPSITE FLEXIGRID jest przeznaczony do:
- Postępowania w przypadku powierzchniowych ran (np. drobne oparzenia, oparzenia, otarcia, skaleczenia i owrzodzenia nóg w końcowej fazie gojenia).
  - Ochrony skóry przed otarciami i zanieczyszczeniem z zewnątrz. W profilaktyce odleżyn.
  - Utrzymanie bezpośredniego opatrunku np. INTRASITE<sup>®</sup> Gel, ALLEVYN<sup>®</sup> Cavity, ALLEVYN Non-Adhesive.
  - Mocowanie cewników.
  - Ochrona skóry wokół stomii i pod workami do zbiorów mocz.
  - Opatrunek ran pooperacyjnych, przeszczepów skóry i miejsc pobrania materiału do przeszczepu.

### Dostępność produktu

Kod	Wymiary	Liczba kartonów
4628	6 cm x 7 cm	100
66004633	10 cm x 8 cm	100
4629	10 cm x 12 cm	10
4630	10 cm x 12 cm	50
4631	15 cm x 20 cm	10
4632	12 cm x 25 cm	20

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglia.  
 ©Znaki towarowe firmy Smith & Nephew ©Smith & Nephew  
 Data wydania 07/2017 www.smith-nephew.com



Nie używać zawartości, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone

# OPSITE<sup>®</sup> FLEXIGRID<sup>®</sup>

## Prosojna obloga

### Opis

OPSITE FLEXIGRID je prosojna filmska obloga, ki je sestavljata poliuretanski film z akrilnim lepilom. Film podpira prožna mrežasta držalna plast, ki zagotavlja preprost namestitveni sistem.

### Način delovanja

Pri uporabi na ranah film OPSITE zadržuje eksudat in tako ustvari vlažno okolje. Film prepušča vlažne hlapce, s čimer omogoča izhlapevanje odvečnega eksudata ter preprečuje maceracijo kože. Obloga OPSITE FLEXIGRID je vodooodporna in pomaga pri preprečevanju bakterijske kontaminacije rane. Film je zelo raztegljiv in prilagodljiv ter ga je mogoče zlahka prilagoditi nerodnim predelom. Mrežasta držalna plast lahko služi za mapiranje ran in spremljanje procesa celjenja.

### Indikacije

- Obloga OPSITE FLEXIGRID je indicirana za:
- oskrbo površinskih ran (npr. lažje opekline, oparine, odrgnine, raztrganine in razjede spodnjih okončin v zadnji fazi celjenja);
  - zaščito kože pred trenjem in zunanjo kontaminacijo; Za preprečevanje razjed zaradi pritiska;
  - zadrževanje primarnih oblog, kot so npr. INTRASITE<sup>®</sup> Gel, ALLEVYN<sup>®</sup> Cavity, ALLEVYN Non-Adhesive;
  - pritrjevanje katetrov;
  - zaščito kože okoli stomie in pod nožnimi vreckami;
  - oblaganje ran po operacijah, kožnih presadkov in darovalskih mest.

### Previdnostni ukrepi za uporabo

Če se rana okuži, je treba okužbo zdraviti skladno z lokalnim kliničnim protokolom. Kadar oblogo odstranjujete z žuljev, bodite še posebej previdni, saj je vrhni sloj kože žulja zelo občutljiv. Ta kožni sloj se lahko odluči, če obloga še ni bila zelo dolgo nameščena. Pri pacientih s tanko ali občutljivo kožo bodite previdni, da pri večkratnem nameščanju ne poškodujete kože. Kot je običajno pri vseh lepilnih izdelkih, so poročali o nekaterih primerih draženja in/ali maceracije kože okoli rane. Upoštevajte, da lahko neustrezna uporaba ali prepogosto menjavanje oblog zlasti pri pacientih z občutljivo kožo povzročita oguljenje kože. Med običajno telesnim procesom celjenja se iz rane odstranjuje nepotrebne material, zato bo rana po prvih nekaj menjavah obloge videti večja. Če se rana po prvih nekaj menjavah obloge še naprej veča, izdelek prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravstvenim delavcem. Če se pojavijo kakršni koli znaki draženja (pordelost, vnetje), maceracije (prekomerna hidracija kože), hipergranulacije (odvečno tkivo) ali občutljivosti (alergijske reakcije), izdelek prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

### Navodila za uporabo

- Mesto namestitve očistite in posušite.
- Odstranite hrbtni listič.
- Namestite oblogo, odstranite stranski zavihek in pogladite.
- Po potrebi naredite obris rane na držalni plasti z zeleno mrežo, preden to plast odstranite.
- Odstranite držalno plast.
- Če zelite oblogo odstraniti, privzdignite en vogal in jo nežno povlecite vzporedno s kožo. Obloga lahko ostane nameščena do 14 dni. Z uporabljenjo oblogo ravajte previdno in jo previdno zavrzite.

### Razpoložljivost izdelkov

Koda	Velikost	Količina v škatli
4628	6 cm x 7 cm	100
66004633	10 cm x 8 cm	100
4629	10 cm x 12 cm	10
4630	10 cm x 12 cm	50
4631	15 cm x 20 cm	10
4632	12 cm x 25 cm	20

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglija.  
 ©Blagovne znamke družbe Smith & Nephew ©Smith & Nephew  
 Datum izdaje 07/2017 www.smith-nephew.com



Ne uporabljajte, če je ovojnina odprta ali poškodovana