

OPSITE® POST-OP VISIBLE


Vodotěsné krytí odolné vůči bakteriím, s průhledným absorpčním polštářkem

Popis
OPSITE® Post-Op Visible je vodotěsné krytí odolné vůči bakteriím, opatřené průhledným absorpčním polštářkem.

Princip funkce
Krytí OPSITE Post-Op Visible má trojvrstvou strukturu, která kombinuje vrstvu s nízkou přilnavostí pro kontakt s ránou, hydrocelulární pěnový polštářek a vysoce prodyšnou vodotěsnou fólii. Fólie je nepropustná pro kapalinu a bakterie a pokud je krytí neporušené, chrání místo rány před vnější kontaminací. Mřížkové provedení hydrocelulárního pěnového polštářku umožňuje průběžnou vizuální kontrolu místa poranění a okolní kůže bez výměny krytí. Navíc ho lze snadno aplikovat čistou technikou a díky vzoru, ve kterém je lepidlo rozloženo, je snížena bolest při odstraňování.

Návod k použití
V souladu s běžnými postupy očistěte a důkladně osušte oblast aplikace.

A. Vyjměte krytí z vnějšího obalu. Odlopněte bílé / oranžové podkladové papíry označené 1.
B. Přidržte neleplivé chloupky na konci krytí a opatrně nalepte krytí na určené místo. Úplně odstraňte podkladový papír.
C. Mírným tlakem uhlad'te krytí na příslušném místě, zejména kolem okrajů, a zkontrolujte, zda pěnový polštářek není stlačený. Pomocí malé chloupky začněte jemně sloupávat horní podklad označený 2. Uhlad'te krytí.

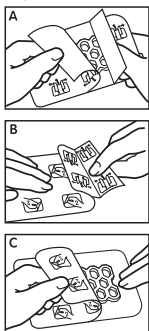

Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
66800136	10 cm x 8 cm	Krabice 20 ks
66800137	15 cm x 10 cm	Krabice 20 ks
66800138	20 cm x 10 cm	Krabice 20 ks
66800139	25 cm x 10 cm	Krabice 20 ks
66800140	30 cm x 10 cm	Krabice 20 ks
66800141	35 cm x 10 cm	Krabice 20 ks

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglie
*Ochranné známky společnosti Smith & Nephew
©Smith & Nephew Datum vydání 05/2020
Vyrobeno v Číně



Nepoužívejte, pokud je obal otevřený či poškozený Zelený bod

OPSITE® POST-OP VISIBLE


Wodoodporny i nieprzepuszczalny dla bakterii opatrunek z przezroczystą podkładką pochłaniającą

Opis
Wodoodporny i nieprzepuszczalny dla bakterii opatrunek OPSITE® Post-Op Visible z przezroczystą podkładką pochłaniającą.

Sposób działania
Opatrunek OPSITE Post-Op Visible ma konstrukcję trójwarstwową, która obejmuje mało przywierającą warstwę mającą kontakt z raną, piankową podkładkę hydrokomórkową i wysoce przepuszczalną folię wodoodporną. Folia jest nieprzepuszczalna dla płynów oraz bakterii i gdy opatrunek pozostaje nienaruszony, chroni miejsce rany przed zewnętrznym zanieczyszczeniem. Krakowana konstrukcja piankowej podkładki hydrokomórkowej umożliwia ciągłą widoczność miejsca rany i otaczającej ją skóry bez konieczności zmiany opatrunku. Ponadto opatrunek można łatwo nakładać stosując czystą technikę, a dzięki warstwie samoprzylepnej rozprowadzanej zgodnie z wzorem błęd podczas usuwania jest mniejszy.

Instrukcja użycia
Zgodnie z normalnymi procedurami oczyszczyć i dokładnie osuszyć obszar, na którym ma być założony opatrunek.

A. Wyjąć opatrunek z opakowania z zewnątrz. Odcedzić biały/pomarańczowy papier na spodzie oznaczony „1”.
B. Trzymając nieprzyklepnę wypustki na końcu opatrunku, ostrożnie umieścić opatrunek na wyznaczonym obszarze. Całkowicie zdjąć papier ochronny.
C. Wygładzić opatrunek na miejscu, wywierając lekki nacisk, szczególnie wokół brzegów i upewniając się, że podkładka piankowa nie jest uciśnięta. Używając malej wypustki, zacząć delikatnie odklejać górny nośnik oznaczony „2”. Wyprostować opatrunek.

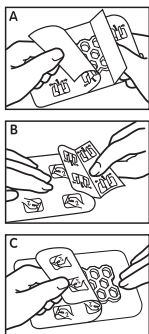

Dostępność produktu

Kod	Wymiary	Dostępność
66800136	10 cm x 8 cm	Kartonik zawiera 20 sztuk
66800137	15 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 20 sztuk
66800138	20 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 20 sztuk
66800139	25 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 20 sztuk
66800140	30 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 20 sztuk
66800141	35 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 20 sztuk

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Wielka Brytania
*Znaki towarowe firmy Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data wydania 05/2020
Wyprodukowano w Chinach



Nie używać zawartości, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone Zielony punkt

OPSITE® POST-OP VISIBLE


Vodoodporna in proti bakterijam odporna obloga s prosojno vpojno blazinico

Opis
OPSITE® Post-Op Visible je vodoodporna, proti bakterijam odporna obloga s prosojno vpojno blazinico.

Način delovanja
Obloga OPSITE Post-Op Visible ima troslojno strukturo, ki združuje rahlo lepljiv sloj za stik z rano, hidrocelularno penasto blazinico in visokoprepusten vodoodporni film. Film je neprepusten za tekočine in bakterije in medtem ko obloga ostaja nedotaknjena, štiti mesto rane pred zunanjo kontaminacijo. Mrežasta zasnova hidrocelularne penaste blazinice omogoča nenehno vizualizacijo mesta rane in okolne kože brez potrebe po menjavi obloge. Poleg tega je obloga mogoče zlahka namestiti s čisto tehniko in po zaslugi vzorčasto razporejenega lepila je zmanjšana tudi bolečina ob odstranjevanju.

Navodila za uporabo
Mesto namestitve očistite in temeljito posušite v skladu z običajnimi postopki.

A. Odstranite oblogo iz zunanje embalaže. Odlepajte bela/oranžna hrbtna lističa, označena z 1.
B. Medtem ko držite nelepljiva zavihka na koncu obloge, oblogo previdno položite na želeni predel. V celoti odstranite hrbtni listič.
C. Oblogo namestite tako, da jo pogladite z rahlim pritiskom, predvsem okoli robov, pri čemer poskrbite, da penasta blazinica ni stisnjena. Z uporabo malega zavihka začnite nežno odlepjati zgornjo držalno plast, označeno z 2. Zgladite oblogo.

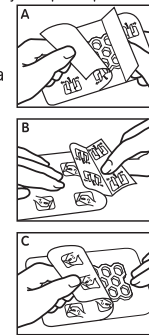

Razpoložljivost izdelkov

Koda	Velikost	Razpoložljivost
66800136	10 cm x 8 cm	20 v škatli
66800137	15 cm x 10 cm	20 v škatli
66800138	20 cm x 10 cm	20 v škatli
66800139	25 cm x 10 cm	20 v škatli
66800140	30 cm x 10 cm	20 v škatli
66800141	35 cm x 10 cm	20 v škatli

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Anglija
*Blagovne znamke družbe Smith & Nephew
©Smith & Nephew Datum izdaje 05/2020
Izdelano na Kitajskem



Ne uporabljajte, če je ovojnica odprta ali poškodovana. Zelena pika