
Mepi™ Debripad

Pro bezpečný, rychlý a méně bolestivý debridement

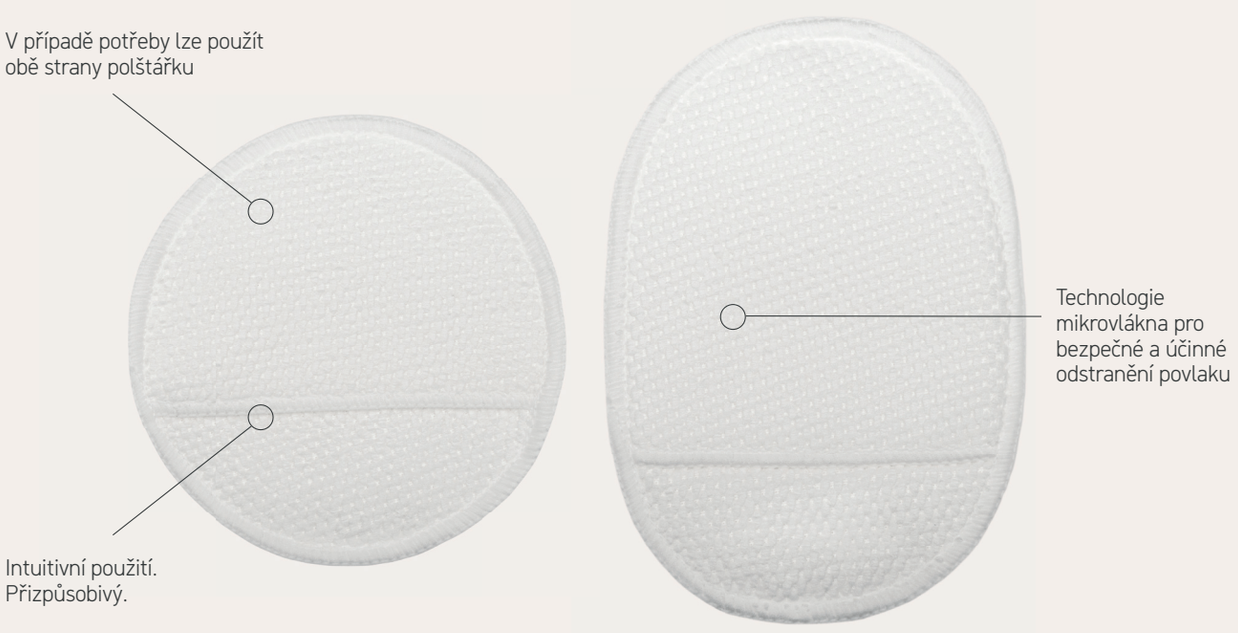

Rychlý a snadný debridement

Zdravé lůžko rány je zásadní pro úspěšné hojení. Mepi™ Debripad představuje jednoduchý způsob, jak odstraňovat odumřelé buňky a tkáň tak často, jak je potřeba, aby mohlo začít hojení.

Bezpečný a jednoduchý na použití

Mepi™ Debripad je pacienty dobře snášen a poskytuje důkladné, terapeutické čištění rány. Zároveň je navržen pro snadné použití.

Péče o rány, na kterou se můžete spolehnout

Moderní technologie mikrovláken u Mepi™ Debripad zajišťuje, že debridement je jemný, ale zároveň důkladný.

Mölnlycke®

Jak používat Mepi™ Debripad



1. Navlhčete Mepi™ Debripad 20 ml vhodného roztoku pro čištění ran (např. Granudacyn). Vložte ruku do připravené části polštářku.



2. Jemně, bez tlaku, otírejte povrch rány.



3. V případě potřeby očistěte okolí rány dalším důkladně navlhčeným kusem Mepi™ Debripad.

Popis produktu

Mepi™ Debripad je polštářek z mikrovláken (polyester/polyamid) určený k rychlému, bezpečnému a málo bolestivému odstranění nekrotické tkáně. Každý polštářek je sterilní a určený pouze k jednorázovému použití.

Výhody Mepi™ Debripad

- Účinné odstranění povlaku a nečistot
- Bezpečně připravuje ránu a okolní kůži na hojení
- Jednoduché a intuitivní použití
- Jemné, málo bolestivé odstranění nekrotické tkáně
- Dvě velikosti pro většinu ran
- Lze zcela navlhčit bez ztráty účinnosti

Indikace k použití

- Diabetické vředy
- Arteriální a žilní bércové vředy
- Proleženiny
- Pooperační sekundárně se hojící rány
- Traumatické nebo chirurgické rány (např. odřeniny, řezné nebo tržné rány)
- Popáleniny a opařeniny (3. stupeň: po chirurgickém odstranění nekrotické tkáně)

Nepoužívat:

- U pacientů s přecitlivělostí na jakoukoli složku materiálu
- K chirurgické implantaci
- Na tvrdou nekrotickou tkáň

Upozornění

- Používejte pod dohledem zdravotnického pracovníka
- Pouze k jednorázovému použití – opětovné použití může ohrozit sterilitu a účinnost
- Znovu nesterilizujte
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo je polštářek kontaminovaný
- Nestříhejte
- Nenechávejte Mepi™ Debripad na ráně
- Neužívejte vnitřně, uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat

Sortiment Mepi™ Debripad (Sterilně baleno)

REF	Preskripční kód	Velikost (cm)	Ks v balení	Ks v kartonu
300111	5019132	11 x 18 cm	5	50
300113	5019133	Ø13 cm	5	50

Více najdete na www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3. tel. +420221890511. Mölnlycke Health Care a Mepi Debripad jsou registrované názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group.
© 2025 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZWC1730525

Mölnlycke®