

Informační list **Zkumavky z plastu**

Změna č.: **0**Strana : **1. z 3**

Výtisk č.:

Název (varianty)**Zkumavka 3 ccm PS - VB****Zkumavka 5 ccm PS - VB****Číslo****Z410001****Z410002****1. Účel použití**

Zkumavky z plastů (dále jen zkumavky) jsou určeny k odběru, transportu a uchovávání vzorků zejména biologického materiálu k provádění některých laboratorních testů, chemických reakcí a podobně.

2. Klasifikace**3. Provedení**

Zkumavka 3 ccm PS - VB

Zkumavka - 11 x 70 mm, objem 3 ml, válcová s kulatým dnem, bez lemu

Zkumavka 5 ccm PS – VB

Zkumavka - 12 × 75 mm, objem 5 ml, válcová s kulatým dnem, bez lemu, typ Sorwall

4. Technické parametry

Zkumavka je vyrobena z čírého polystyrenu a je bez zátky.

Typ materiálu	Krátkodobá teplotní mez [°C]	Dlouhodobá teplotní mez [°C]	Odolává	Neodolává	Vlastnosti
PS (polystyren)	60-90	55-80	kyseliny, louhy, alkoholy, tuky, oleje, roztoky soli	chlorované, alifatické a aromatické uhlovodíky, benzin vyvolává korozi za napětí	tvrdý, tuhý, křehký, čirý

5. Zdravotní nezávadnost-biologické parametry

Výroba zkumavek je realizována v zóně se zvláštním hygienickým režimem.

6. Balení (druh, rozměr a způsob označení obalu)

Pro : Zkumavka 3 ccm PS - VB

Jednotkové balení: není

Skupinové balení: á 250 ks / zavařený PE sáček

Expediční balení: á 6 000 ks / karton 590x385x380 mm

Návod k použití: není dodáván

Pro : Zkumavka 5 ccm PS – VB

Jednotkové balení: není

Skupinové balení: á 250 ks / zavařený PE sáček

Expediční balení: á 4 000 ks / karton 605x400x315 mm

Návod k použití: není dodáván

Skladovací podmínky: teplota 0°C až + 40°C, neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla.

7. Doprava

Zkumavky jsou přepravovány v čistých, suchých a krytých dopravních prostředcích při teplotě -15°C do + 60°C tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spolu s nimi nesmí být přepravovány žádné chemikálie. Při přepravě je třeba dbát na výstražné údaje vyznačené na přepravních obalech.

8. Skladování

Zkumavky musí být skladovány v suchých, větraných, bezprašných, temných místnostech při teplotě 0 °C až + 40°C s relativní vlhkostí vzduchu 45 až 75 %. Se zkumavkami nesmí být skladovány organická rozpouštědla a chemikálie.


Zkumavky v přepravních obalech mohou být skladovány nejvýše v osmi vrstvách ležících na sobě.

9. Exspirace


Doba expirace (použitelnosti) je 5 let od data výroby a je značena šesticiferným číslem na skupinovém i přepravním obalu. Prvé čtyřčíslí značí rok expirace a následující dvojčíslí značí měsíc expirace.

Obr. č. 1 - Provedení nesterilních zkumavek

Zkumavka 3 ccm PS – VB

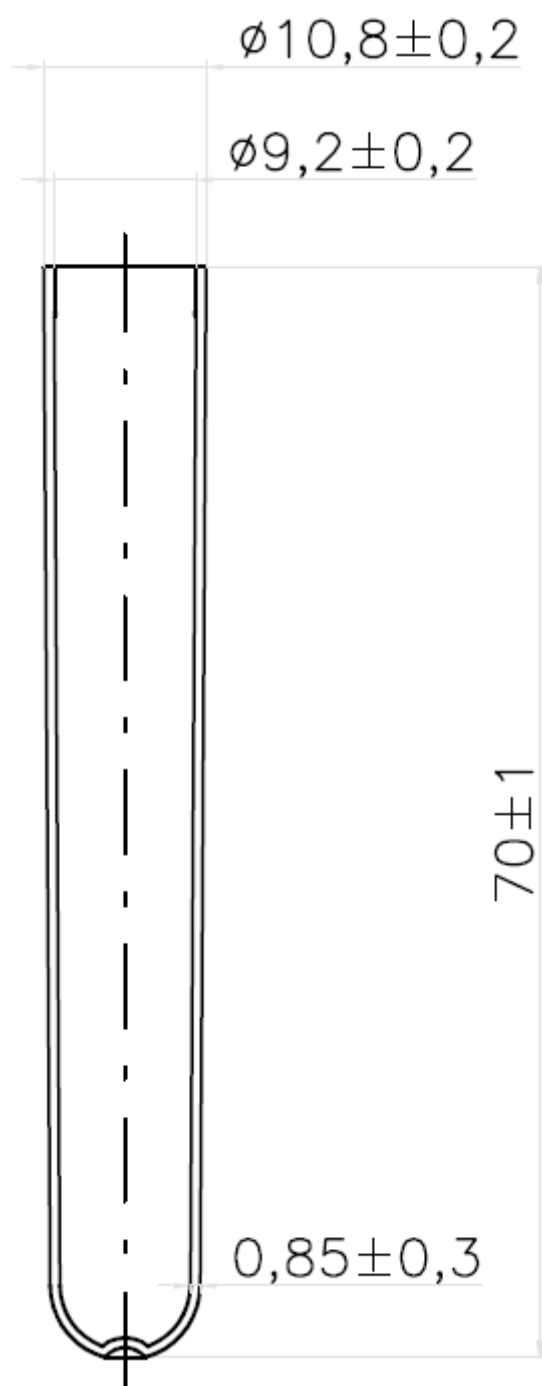

Zkumavka 5 ccm PS - VB

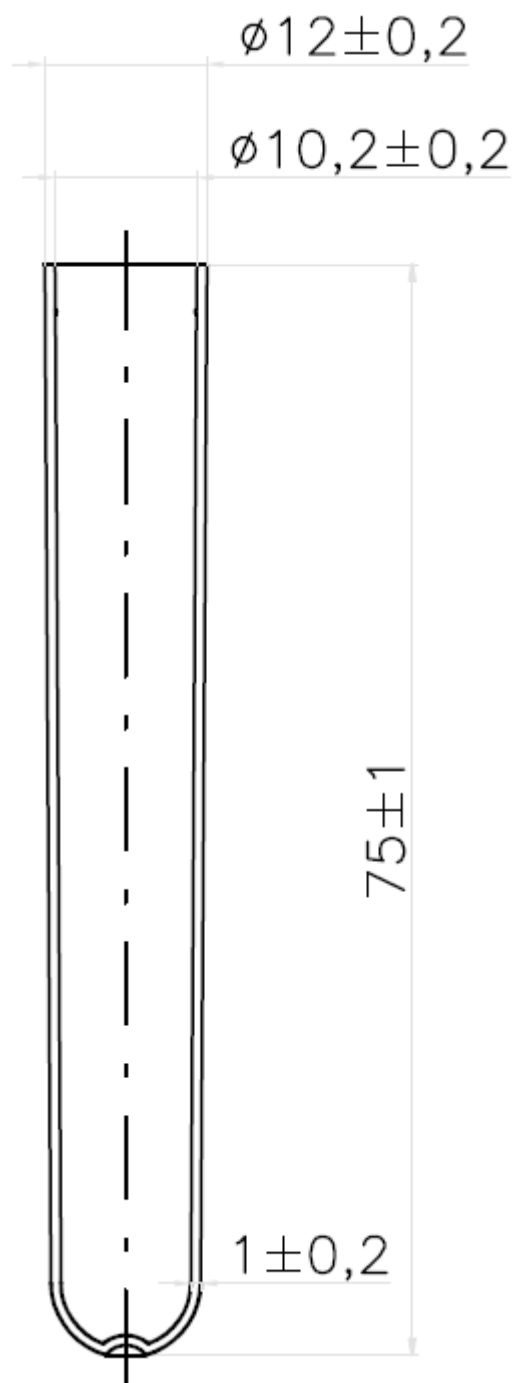

10. Výrobce

FL MEDICAL S.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20 – 35038 Torreglia (FO) - ITALY